
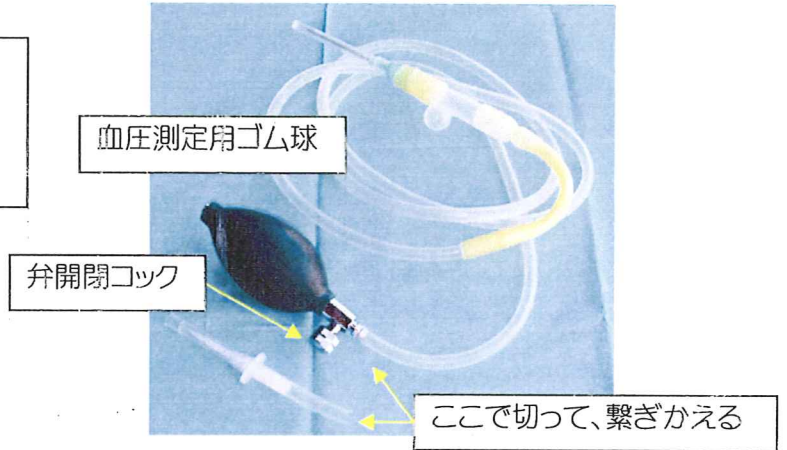


☆Ca 剤の皮下投与の強力な味方が、ついにあのキャラクターから生まれました！

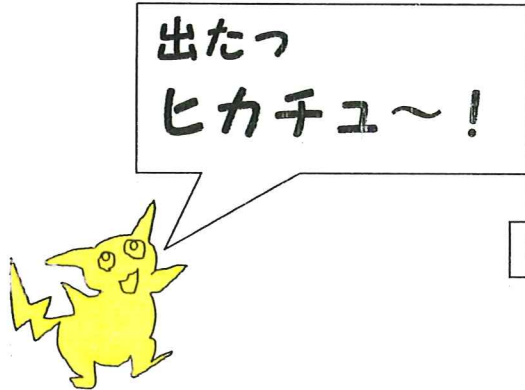

Ca 剤 500ml 皮下投与をいかにも簡単に行うための補助器具を考え続けて早 8 年。  
 (「ヒカチュ〜」の名前だけは早期に決定しておりましたが…[高橋理恵さんのオカゲ])  
 ローラー絞り方式/空缶つぶし方式等、どれも試作段階でただのゴミとなりました。  
 しかしこの度、血压測定用のゴム球を利用した良い「ヒカチュ〜」ができたのです。

※ 「ヒカチュ〜」で皮下注射するには、補液セットを2つ使用することになります。

- ① 補液セットチューブのプラスチック針の方を切って、ゴム球に連結する。  
 ※ この時、ゴム球の弁開閉コックを閉めておくこと(時計回り)。
- ② 牛を保定し、Ca 剤のボトルを吊るす。
- ③ ①できた「ヒカチュ〜」をボトルに刺す(右図)。
- ④ 牛に皮下注射する。
- ⑤ 「しゅぼしゅぼごぼごぼ」する。



※ 終了した時点で、牛から針を抜かなければ、皮下に空気が入ってしまうので注意。

これは早いし、  
 きれいに入るし、  
 楽でヒッカ〜！！

※ 空気取り入れ口はゴム球のお尻にあります。汚い軍手などから、ほこりなど感染物が混入しないよう注意。